


APESIN spray F

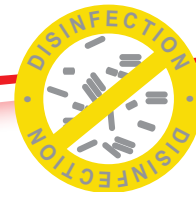

Parfümfreie, flüssige, alkoholische Schnelldesinfektion

- Schnell wirksam
- Duft- und farbstofffrei

Produktprofil

- APESIN Spray F ist ein schnell wirkendes Desinfektionsmittel gegen Bakterien, Hefe und mit begrenzter viruzider Wirkung.
- Es eignet sich für alle alkoholbeständigen Oberflächen und Möbel in Gesundheitseinrichtungen, in industriellen und institutionellen Bereichen sowie für Lebensmittelbereiche.
- Oberflächen mit direktem Lebensmittelkontakt müssen nach Anwendung des Produkts nicht abgespült werden. Dies erspart einen Arbeitsschritt.
- APESIN Spray F ist frei von Chlor, Aldehyd und Phenol.

Anwendungsbereich

- Das Produkt kann auf Matratzen, Betten, Transportwagen, Instrumentenablagen, Teppichen, Badfliesen, Abfall-eimer, Toilettensitze, Rahmen, Türgriffe, Möbel und Arbeitsflächen, Handläufe, Schuhe sowie an schwer zugänglichen Stellen verwendet werden.
- Auch zur Reinigung von Schneidkästen und Behältern geeignet. Es ist gut für Messer, Stiefel und Reinigungsmaschinen verwendbar.
- APESIN Spray F kann auf Aluminiumoberflächen aufgetragen werden.
- Nicht auf alkoholempfindliche Materialien anwenden (z. B. PLEXIGLAS®).

Anwendungshinweis

- Unverdünnt auftragen. Aus kurzer Entfernung auf ein sauberes, saugfähiges Tuch auftragen und die Oberfläche vollständig benetzen und abwischen.
- Max. 50 ml / m². Keine größeren Flächen am Stück (max. 2m²) behandeln.
- Das Produkt einwirken lassen. Detaillierte Informationen zum Wirkspektrum und Einwirkzeiten können der nächsten Seite entnommen werden.

Inhaltsstoffangabe:

Zusammensetzung pro 100g: 40g ISOPROPYL ALCOHOL, 25g PROPYL ALCOHOL

Nachhaltigkeit und Produktion:



Produktsicherheit, Lagerung und Umweltschutz

Sicherheit: Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Ausführliche Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Lagerung: Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern.

Umweltschutz: Behälter nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Anwendung und Dosierung

 Folgende Anweisungen befolgen.

Desinfektion:
Geeignet für Bereiche mit speziellen Hygiene Anforderungen..

Sprüh Anwendung:
Auf ein sauberes Tuch sprühen und die Oberfläche abwischen oder direkt aufsprühen.

Oberflächenreinigung: Die Oberfläche mit einem sauberen Tuch nass oder feucht wischen.

Toilettenreinigung: WC-Sitze reinigen.

konz. Ideal für die Anwendung auf Oberflächen in der Küche.



Verkaufseinheiten:

Bestell-Nr. 714867 10 x 750 ml

Ihr Partner:

pH-Wert 1%:



APESIN spray F

Parfümfreie, flüssige, alkoholische Schnelldesinfektion

Oberflächendesinfektion:		Einwirkzeit			
Lebensmittelbereich / Industrieller und gewerblicher Bereich		30 sek.	1 min.	2 min.	5 min.
Bakterizid					
EN 1276	hohe org. Belastung		x		
EN 13697	hohe org. Belastung		x		
Levurozid					
EN 1650	hohe org. Belastung		x		
EN 13697	niedrige org. Belastung		x		
Oberflächendesinfektion:		Einwirkzeit			
Medizinischer Bereich		30 sek.	1 min.	2 min.	5 min.
Bakterizid					
EN 13727	hohe org. Belastung	x			
EN 13697	hohe org. Belastung		x		
EN 16615	hohe org. Belastung		x		
Tuberkulozid					
EN 14348	hohe org. Belastung	x			
Levurozid					
EN 13624	hohe org. Belastung	x			
EN 13697	hohe org. Belastung		x		
EN 16615	hohe org. Belastung		x		
Viruzid					
EN 14476	viruzide Wirkung gegen behüllte Viren	x			
EN 14476	(Vacciniavirus)	x			
EN 14476	(MNV)			x	

